


Массажер для ног Defender Bio Pro FT-03

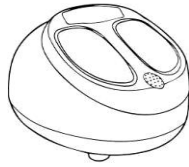

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкции по технике безопасности:

- а) Важно: обязательно внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием, для обеспечения безопасности и надлежащего использования изделия.
- Обязательно используйте изделие, следуя инструкциям, приведенным в данном руководстве
 - После использования или перед чисткой изделия, пожалуйста, отключите его от сети.
 - Всегда используйте функцию подогрева с осторожностью, чтобы избежать серьезных ожогов.
 - Не используйте устройство если у вас слишком чувствительная кожа, а также на участках тела с плохим кровообращением.
 - Никогда не позволяйте детям или лицам с физическими или психическими расстройствами пользоваться функцией обогрева, иначе неправильная эксплуатация может быть опасной.
 - Во избежание пожара, поражения электрическим током или других повреждений, вызванных перегревом, никогда не используйте массажер под подушкой или одеялом. А также не накрывайте его во время использования, чтобы избежать неисправности или повреждения в результате перегрева двигателя.
 - Дети, лица с физическими и психическими расстройствами, а также инвалиды должны находиться под наблюдением при использовании массажера.
 - Пожалуйста, немедленно прекратите использование, если вы почувствуете дискомфорт.
 - При повреждении кабелей питания или вилки, неправильной эксплуатации, падении, повреждении устройства или попадании его в воду не используйте данное устройство. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для осмотра и ремонта.
 - Не используйте запасные части, которые не рекомендованы производителями.
 - Не вставляйте и не роняйте посторонние предметы в какие-либо отверстия изделия.
 - Пожалуйста, выключите устройство перед отключением его от сети, если вы хотите отключить питание.
 - Данный продукт нельзя использовать для самодиагностики или лечения, и, пожалуйста, обратитесь за профессиональной медицинской помощью, если вам необходима диагностика или лечение.
- б) Среда использования
- Не используйте изделие во влажной или пыльной среде, чтобы избежать выхода изделия из строя.
 - Не используйте данное изделие при комнатной температуре выше 40,0.
 - Не используйте изделие на открытом воздухе.
 - Не используйте изделие рядом с электронагревателем или плитой, а также под прямыми солнечными лучами.
- с) Не рекомендуется использовать продукт в случаях:
- Если вы проходите медицинское лечение или испытываете физический дискомфорт
 - Гипертония, болезни сердца, церебральный атеросклероз и церебральный тромбоз.
 - Любые виды, формы и стадии онкологических заболеваний
 - Беременность, кормление грудью, период менструаций
 - Остеопороз
 - Использование кардиостимулятора или имплантируемых медицинских устройств
 - Острые заболевания
 - Несовершеннолетние
- д) Панель управления
- Не нажимайте на кнопку мокрыми руками.
 - Не допускайте попадания на кнопки воды или другой жидкости.
 - Не засыпайте во время использования устройства.
 - Не используйте это изделие, когда вы пьяны или чувствуете дискомфорт.
 - Не прикасайтесь непосредственно к массажной подушечке руками, суставами стоп, коленями, грудью и животом.
 - Не используйте это средство более тридцати минут подряд.
 - Не используйте, если тканевый чехол изделия поврежден.
 - Не используйте продукт за час до и после еды, чтобы избежать побочных эффектов.
 - Не включайте функцию подогрева, если изделие используется при низкой температуре в помещении. Рекомендуется постепенно доводить температуру до нормального уровня, прежде чем включать нагрев.
 - Если изделие используется сразу после перевода из холодной среды в теплую, скопление водяных паров внутри изделия может повлиять на нормальную работу изделия или даже привести к механическому повреждению. Рекомендуется оставить продукт при нормальной комнатной температуре на 1 час, прежде чем приступать к его использованию после переноса.
- ### Эксплуатация:
- а) Хранение
- Изделие следует поместить в цветную коробку и хранить в безопасном, сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +10 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 60%, когда оно не используется.
 - Не допускайте попадания пыли в изделие.
 - Не переключайте кнопку включения и шнур питания. Не подвешивайте изделие за шнур.
 - Избегайте царапин острыми предметами на поверхности изделия.
 - Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.

б) Очистка

- Перед чисткой убедитесь, что кнопка питания выключена, и отсоедините шнур питания от розетки.
- Протирайте поверхность изделия сухой тканью.

*Примечание: Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства, такие как бензол или растворитель.

с) Использование

- Не используйте устройство в ванной или в помещении с высокой влажностью.
- Используйте массажер только в положении сидя. Не становитесь на него ногами, это может привести к поломке устройства.

Устранение неисправностей:

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими советами и возможными решениями, если во время использования данного продукта возникнут проблемы.

Проблема	Возможные причины	Варианты решения
Не работает	1. Отключен от сети 2. Кнопка включения не нажата	1. Подключите устройство к источнику питания или проверьте, хорошо ли подключено устройство. 2. Нажмите кнопку включения
Внезапная остановка работы	1. Отключение питания 2. Продолжительность операции более 15 минут 3. Перегрев продукта 4. Слишком большое давление, при котором массажные ролики перестают вращаться	1. Проверьте, хорошо ли подключено устройство 2. Перезапустите продукт 3. Перезапустите устройство после охлаждения 4. Уменьшите давление на ролики и перезапустите устройство

Основные технические параметры:

Номинальное напряжение AC110-250V; DC12V/50-60 Гц / Номинальная мощность 40 Вт
Стандарты GB 4706.1-2005 / GB 4706.1-2008 / Таймер 15 минут

Управление:

Кнопка **Timer**: для управления таймером массажа. Кнопка **Mode**: для переключения режимов массажа.
Кнопка **Intensity**: для управления интенсивностью массажа. Кнопка **Heating**: Для управления нагревом.
Кнопка **Relax**: Работает только воздушная подушка. Кнопка питания **On/Off**: Для включения / выключения устройства.

- а) Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений и обеспечьте стабильную и комфортную среду использования.
- б) Для использования устройства подключите шнур питания к сети переменного тока 110-250 В; постоянного тока 12 В/50-60 Гц
- Нажмите кнопку питания один раз, включится нагрев, интенсивность низкая, когда на дисплее отображается "01"; интенсивность средняя, когда на дисплее отображается "02"; и интенсивность самая высокая, когда на дисплее отображается "03".
 - Нажмите кнопку питания один раз, затем нажмите кнопку нагрева один раз, и функция нагрева будет выключена, когда погаснет красный индикатор.
 - Когда устройство включено, нажмите кнопку Timer, чтобы переключить таймер в диапазоне от 5 до 30 минут.
 - Когда устройство включено, нажмите кнопку Mode для переключения двух режимов: "01" - режим 1; "02" - режим 2; Нажмите кнопку Relax - режим 3

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ±10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей

Изготовитель: Цзиньхуа Синбу Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: №1 Билдинг, Сяцзе Вилладж, Сяошунь Таун Цзиньдун Дистрикт, Цзиньхуа Сити, Чжецзян Провинс, Китай

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО "ТД Компания Дефендер" Адрес: 127030, г. Москва, ул. Суцэвская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Кепілдеме 6 ай. Срок службы 6 месяцев. Қызмет мерзімі 6 ай.

Срок годности: 5 лет. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

www.defender.ru

